

Riposa®

Руководство пользователя

Массажёр для коленей, плеч, локтей.

С вибрацией и нагревом.



Riposa®

**Спасибо за выбор нашего продукта!
Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство перед использованием.**

Изображения в данном руководстве являются условными и могут отличаться от реальных.

Применение и назначение

Массажёр RA-KE-01 предназначен для использования в области колен, плеч, локтей. Разработан специально для простого и удобного проведения массажа на дому. Снимает усталость и облегчает боли в коленном, плечевом, локтевом суставах. Позволяет проводить процедуры физиотерапии. Полезен для восстановления при забитых мышцах, вывихах и травмах, улучшает циркуляцию крови. Массажёр предназначен для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажёра, внимательно изучите настоящее руководство и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажёра.

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Проверьте кабель питания перед использованием. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство. Не используйте, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения. Не трогайте массажер мокрыми руками. Не погружайте его в воду.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или в местах с легковоспламеняющимися материалами.
- Не используйте устройство дольше чем 30 минут.
- Данное устройство запрещено использовать детям, лицам с ограниченными возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Не подвергайте массажер воздействию острых предметов, во избежание повреждения воздушных камер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не вставайте и не ходите во время использования.
- Не оставляйте работающее устройство под подушками, одеялами и т. п.

Предупреждение

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны или недавно родили
 - имеете нарушения чувствительности кожи (в т. ч. при отсутствии чувствительности к нагреванию)
 - недавно перенесли травмы (переломы, растяжения), в том числе в результате дорожно-транспортных и других происшествий
 - проходите реабилитацию после операции
 - имеете злокачественные опухоли, заболевания сердца или остеопороз
 - используете кардиостимулятор или имеете имплантированные медицинские устройства
 - страдаете заболеваниями коленей, локтей, плеч
-
- **Не используйте прибор, если на теле имеются порезы, открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.**
 - **Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.**

Характеристики

Наименование	Массажёр для коленей, плеч, локтей
Модель	RA-KE01
Аккумулятор	5000 мАч
Таймер по умолчанию	30 мин.
Номинальное напряжение	5 В ==
Напряжение зарядки	5 В ==
Потребляемая мощность	8 Вт
Режимы вибрации	3 режима и Выкл.
Уровни нагрева	5 уровней и Выкл.
Условия работы	Температура 0°C ~ 40°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 106 кПа
Условия хранения и транспортировки	Температура -10°C ~ 50°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 110 кПа
Сертификаты безопасности	GB4706.1-2005 GB4706 10-2008 GB18401-2010(B)

Комплект поставки

Массажёр, кабель питания Туре-С, дополнительный переходник для массажа плеча.

Внимание

- Не накрывайте устройство во время использования (это может вызвать ожоги).
- Если возникнут проблемы во время использования, немедленно отключите устройство и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети после полной зарядки. Время зарядки не должно превышать 5 часов. Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки).
- Если во время зарядки устройство сильно нагревается или от него исходит запах, немедленно отключите его от питания и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Не разбирайте устройство, так как это может вызвать удар электрическим током, короткое замыкание или пожар. Ремонт устройства могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Не используйте во время сна.

Использование

На заметку

- Чрезмерный массаж вреден для здоровья.
- Начинайте с 1 уровня нагрева и режима вибрации M1 при использовании.
- Лёгкое покраснение и тепло на коже после использования – это нормально. Однако, если после массажа данным устройством наблюдаются сильное покраснение и опухание кожи, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Избегайте прямого контакта массажёра с кожей. Для безопасности наденьте тонкую одежду. Устройство может быть очень горячим при длительном использовании и вызвать ожоги. Функцию нагрева не следует использовать непрерывно более 30 минут, чтобы избежать ожогов.
- Остановите процедуру, если Вы почувствуете дискомфорт, головокружение, головную боль или появится одышка во время массажа. В указанных случаях немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Автоматическое отключение происходит через 30 минут после запуска устройства.

Управление (кнопки и индикаторы)



! Внимание


Индикатор питания быстро мигает, если батарея разряжена, мигает медленно во время зарядки и горит, когда аккумулятор массажера заряжен. Перед началом использования зарядите аккумулятор массажера, используя зарядное устройство на 5В, 2А (не входит в комплект поставки). Время зарядки ≤4 часов. Время работы около 2.5 часов.

Как использовать

1 Включение. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. По умолчанию включается режим вибрации M1 и нагрев — уровень 1. (Если устройство не включается, зарядите его и попробуйте снова).



- 2 Зафиксируйте устройство (липучка), как показано на рисунке.

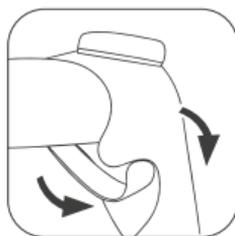

- 3 Нажмите на кнопку , чтобы изменить уровень нагрева или выключить его. Предусмотрено 5 уровней нагрева: 45 °C = уровень 1, 50 °C = уровень 2, 55 °C = уровень 3, 60 °C = уровень 4, 65 °C = уровень 5, 00 °C = означает, что нагрев выключен.



- 4 Нажмите на кнопку , чтобы изменить режим вибрации или выключить его. Возможно переключение между 3 режимами вибрации M1, M2, M3 и 00 = обозначает, что режим вибрации выключен.



- 5 **Блокировка/разблокировка экрана и выключение.** Используйте короткое нажатие на кнопку питания  для блокировки/разблокировки экрана. Нажмите и удерживайте кнопку  питания, чтобы выключить устройство.



Варианты использования

Локоть



Колено



Плечо



Уход и хранение

Уход за основным блоком

Перед чисткой выключите устройство и дайте ему остыть. Пожалуйста, используйте мягкую, сухую ткань для очистки. Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.



Требования к хранению

Храните продукт в недоступном для детей месте, в сухом, прохладном помещении и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Пожалуйста, выключайте устройство, если Вы его не используете. Необходимо заряжать массажёр каждые 2 месяца.



Устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, то проверьте следующие пункты. Если наши рекомендации не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу, изготовителю или импортёру.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Массажёр подключен к эл.розетке	Отключите кабель питания
	Батарея разряжена	Зарядите устройство
	Кнопка питания не сработала	Нажмите и удерживайте кнопку питания 3-5 секунд
После зарядки работает только несколько минут	Срок службы батареи истек (около 5 лет)	Обратитесь к продавцу, изготовителю или импортёру
Массажёр останавливается во время работы	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Остановка через 30 минут – срабатывает встроенный таймер	Нужен перерыв

Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов. Литиевая батарея, используемая в этом устройстве, является ценным ресурсом, который подлежит переработке. Специальная батарея, используемая в этом продукте, не должна использоваться в других устройствах. Не бросайте в огонь, чтобы избежать взрыва.



Гарантия

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное устройство подлежит бесплатному ремонту или обмену торговым предприятием, продавшим его.
2. Гарантийная замена производится при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве.
3. Гарантия на устройство не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя устройства из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т. п.;
 - использования устройства в условиях и режимах, отличающихся от бытовых;
 - в случае повреждения устройства в результате пожаров, землетрясений, наводнений и иных стихийных бедствий;
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного устройства производился самостоятельно или неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Товар сертифицирован.



Riposa в переводе с итальянского означает «отдыхай».
Для нас это не просто слово, а состояние, к которому
мы стремимся в каждом продукте. Мы верим, что забота
о себе — это не задача, а удовольствие.