


Riposa®

Руководство пользователя

Массажёр для ног с воздушной компрессией

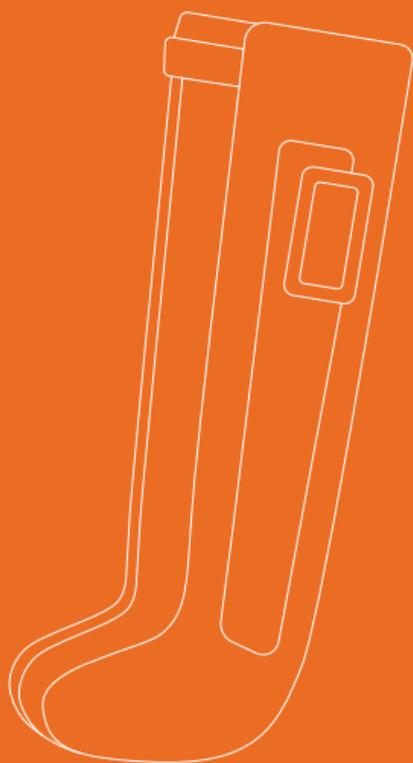

Riposa®

**Спасибо за выбор нашего продукта!
Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство перед использованием.**

Изображения в данном руководстве являются условными и могут отличаться от реальных.

RA-LG01S-2/RA-LG01M-2/RA-LG01L-2

Применение и назначение

Воздушно-компрессионный массажёр RA-LG01 предназначен для использования в области ступней, икроножных мышц, бедер. Разработан специально для простого и удобного проведения массажа, не прибегая к услугам посторонних людей. Представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет эффективный способ расслабления, снятия напряжения в мышцах и борется с ощущением усталости. Полезен для восстановления при забитых мышцах, улучшает циркуляцию крови. Массажёр предназначен для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажёра, внимательно изучите настоящее руководство и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажёра.

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Проверьте кабель питания перед использованием. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство. Не используйте, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения. Не трогайте массажер мокрыми руками. Не погружайте его в воду.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или в местах с легковоспламеняющимися материалами.
- Не используйте устройство дольше чем 30 минут.
- Данное устройство запрещено использовать детям, лицам с ограниченными возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Не подвергайте массажер воздействию острых предметов, во избежание повреждения воздушных камер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не вставайте и не ходите во время использования.
- Не оставляйте работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.

Предупреждение

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- Имеете нарушения чувствительности кожи (в т. ч. при отсутствии чувствительности к нагреванию) и онемение конечностей
- Проходите реабилитацию после операции
- Имеете злокачественные опухоли, заболевания сердца
- Находитесь в состоянии недомогания или плохого самочувствия, с температурой выше 38°C
- Имеете повреждения кожных покровов (раны, порезы и т. п.) в области стоп, голеней, бедер

Запрещается использовать массажер, если у Вас:

- установлен кардиостимулятор или имплантированы медицинские устройства
 - беременны или Вы недавно родили
 - остеопороз, перелом или растяжение мышц
 - тяжёлые нарушения кровообращения в области ног
 - тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной артерии, острый тромбоз флебит
 - тромбы, тяжёлые артериальные аневризмы, острые венозные аневризмы или кожные инфекции
 - острый отек лёгких, острая инфекция
 - острая сердечная недостаточность
-
- Не используйте устройство, если массируемая область тела воспалена, в нее делаются уколы, есть порезы, синяки, открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли или любые другие повреждения внутренние или внешние.
 - Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
 - Не рекомендуется использование для повышения венозного или лимфатического оттока в зоне массажа.

Характеристики

Наименование	Массажёр для ног с воздушной компрессией
Тип/Модель	Тип: RA-LG01 (размеры S/ M/ L) Модели: RA-LG01S-2/ RA-LG01M-2/ RA-LG01L-2
Аккумулятор	4400 мАч
Таймер по умолчанию	15 минут (регулируется от 15 до 30 минут)
Номинальное напряжение	7.4 В ===
Напряжение зарядки	5 В === 2А
Потребляемая мощность	14 Вт
Режимы массажа	3 режима + ручную
Интенсивность	5 режимов давления (95/ 120/ 145/ 170/ 195 мм рт.ст.)
Условия работы	Температура 0°C ~ 40°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 106 кПа
Условия хранения и транспортировки	Температура -10°C ~ 45°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 110 кПа


Комплект поставки

Массажёр (2 манжеты), кабель питания Туре-С – 2шт., чехол для хранения – 2шт.

Размеры массажера

Размерная сетка (мм)

Размер	Высота	Длина стопы	Рекомендации
S	992	626	рост до 165 см
M	1092	698	рост от 165 до 180 см
L	1192	770	рост от 180 см и выше

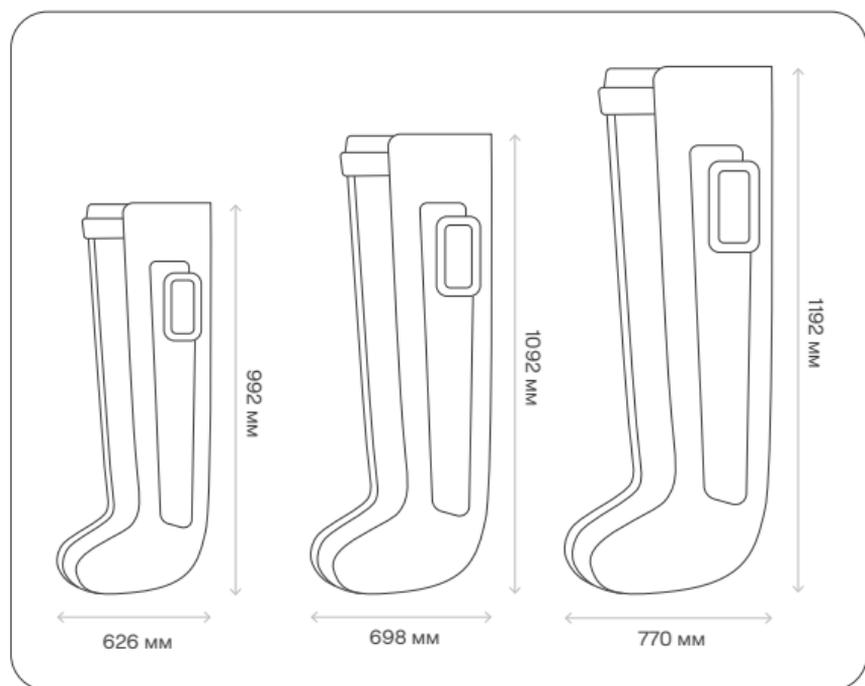

Внимание

- Не накрывайте устройство во время использования (это может вызвать перегрев).
- Если возникнут проблемы во время использования, немедленно отключите устройство и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортёру.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети после полной зарядки. Время зарядки не должно превышать 4 часов. Пожалуйста, используйте зарядное устройство на 5В, 2А (не входит в комплект поставки).
- Если во время зарядки устройство сильно нагревается или от него исходит запах, немедленно отключите его от питания и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Не разбирайте устройство, так как это может вызвать удар электрическим током, короткое замыкание или пожар. Ремонт устройства могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Не используйте во время сна.
- Это устройство предназначено для домашнего использования и не заменяет медицинские приборы или лекарства.

Использование

На заметку

- Чрезмерный массаж вреден для здоровья.
- Начинайте с режима массажа 2 (расслабляющий) и с 1 уровня интенсивности (малая) при использовании.
- Лёгкое покраснение и тепло на коже после использования – это нормально. Однако, если после массажа данным устройством наблюдаются сильное покраснение и опухание кожи, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Остановите процедуру, если Вы почувствуете дискомфорт, головокружение, головную боль или появится одышка во время массажа. Немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Автоматическое отключение происходит через 15 минут после запуска.
- Манжеты массажера на правую и левую ногу отличаются, проверьте маркировку. Блок управления должен располагаться на внешней стороне бедра.

Основные элементы управления



Примечание

Индикатор питания быстро мигает, если батарея разряжена, мигает медленно во время зарядки и горит, когда аккумулятор массажёра заряжен. При блокировке экрана мигают индикаторы зон воздействия воздушных подушек.

Зарядка

Перед началом использования зарядите аккумулятор массажёра, используя зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки). Для обеспечения Вашей безопасности приобретите и всегда используйте качественный адаптер питания для зарядки устройства. Подключите кабель питания Type-C к разъему зарядки массажёра и к адаптеру питания. Адаптер питания вставьте в розетку электросети. Время полной зарядки ≤ 4 часа.

! Внимание

Это устройство нельзя использовать во время зарядки. Во время зарядки небольшое нагревание устройства и адаптера питания является нормальным.

Как использовать

1 Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания , чтобы включить устройство. (Если устройство не включается, зарядите его и попробуйте снова.) Настройки по умолчанию: режим , интенсивность 95 мм рт. ст., таймер на 15 минут.



2 Кнопка таймера регулирует время сеанса массажа с шагом в 5 минут — до 30 минут. При нажатии на отметке 30 минут таймер сбрасывается на 10 минут.



3 Интенсивность массажа регулируется кнопками «-/+». Предусмотрено 5 уровней: 95 → 120 → 145 → 170 → 195 мм рт. ст. Интенсивность по умолчанию — 95 мм рт. ст.



4 Выбор режима массажа производится кнопками «<< / >>»:

-  полная компрессия
-  расслабляющий (мягкая циркуляция)
-  спортивный (импульс + полное сжатие)



По умолчанию – . В режимах  и  повторное нажатие кнопки «< / >» позволяет сохранить настройки текущего режима.

 – полная компрессия. Каждая камера надувается один раз, затем переходит к следующей, при этом компрессия в предыдущих сохраняется. Последовательно заполняются все камеры. После полной накачки всех камер цикл начинается заново (предварительно все камеры сдуваются).

 – расслабляющий (мягкая циркуляция). Каждая камера надувается трижды, затем переходит к следующей. Компрессия сохраняется только в предыдущей камере. После завершения цикла процесс повторяется с начала.

 – спортивный (импульс + полное сжатие). Каждая камера надувается один раз, затем переходит к следующей, с сохранением компрессии только в предыдущей камере.

По завершении цикла: 1. Все камеры надуваются одновременно, 2. Полностью сдуваются, 3. Все камеры снова надуваются одновременно, 4. Затем начинается новый цикл: камеры сдуваются по одной, начиная с верхней (бедро).

5 Кнопка ручного управления позволяет выбрать зону массажа. Каждое нажатие переключает зоны воздействия по кругу: Воздушная подушка 1 → Подушка 2 → Подушка 3 → Подушка 4 → Подушка 5 → Все 5 подушек → Подушка 1 и т. д. Удержание кнопки переводит устройство в режим . Можно выбрать 1 зону воздействия или одновременно все 5.



Зоны воздействия в различных режимах

	
	
	
	Одна любая из 5 зон воздействия или все 5 одновременно.

6 **Блокировка/разблокировка экрана и выключение.** Используйте короткое нажатие на кнопку питания  для блокировки/разблокировки экрана. Блокировка экрана от случайного нажатия во время массажа. В режиме блокировки индикаторы подушек и зон будут мигать. Нажмите и удерживайте кнопку питания , чтобы выключить устройство.



7 **Спуск воздуха для хранения.** После выключения удерживайте кнопку спуска воздуха, чтобы быстро стравить воздух из подушек для дальнейшего хранения.



Уход и хранение

Уход за блоком управления

Пожалуйста, берегите сенсорный экран блока управления массажера и очищайте его мягкой тканью. Перед чисткой выключите устройство и дайте ему остыть. Пожалуйста, используйте мягкую, сухую ткань для его очистки. Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.



Требования к хранению

Храните устройство в недоступном для детей месте, в сухом, прохладном помещении и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Пожалуйста, выключайте устройство, если вы его не используете. Необходимо заряжать массажер каждые 2 месяца.



Устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, то проверьте следующие пункты. Если наши рекомендации не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Батарея разряжена	Зарядите устройство
	Кнопка питания не сработала	Нажмите и удерживайте кнопку питания 3-5 секунд
Кнопки блока управления не работают	Жидкость или грязь на дисплее	Протрите мягкой, сухой тканью
После зарядки работает только несколько минут	Срок службы батареи истек (около 5 лет)	Обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру
Массажёр останавливается во время работы	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Остановка через 30 минут - срабатывает встроенный таймер	Нужен перерыв 5-10 мин.
Не получается зарядить	Адаптер питания подключен неверно	Проверьте соединения сетевого адаптера питания, кабеля Type-C и массажера
	Батарея портативного аккумулятора села	Если заряжаете от портативного аккумулятора, проверьте, заряжен ли он

Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов. Литиевая батарея, используемая в этом устройстве, является ценным ресурсом, который подлежит переработке. Специальная батарея, используемая в этом устройстве, не должна использоваться в других продуктах. Не бросайте в огонь, чтобы избежать взрыва.



Гарантия

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное устройство подлежит бесплатному ремонту или обмену торговым предприятием, продавшим его.
2. Гарантийная замена производится при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве.
3. Гарантия на устройство не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя устройства из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т. п.;
 - использования устройства в условиях и режимах, отличающихся от бытовых;
 - в случае повреждения устройства в результате пожаров, землетрясений, наводнений и иных стихийных бедствий;
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного устройства производился самостоятельно или неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Товар сертифицирован.



Riposa в переводе с итальянского означает «отдыхай».
Для нас это не просто слово, а состояние, к которому
мы стремимся в каждом продукте. Мы верим, что забота
о себе — это не задача, а удовольствие.