


Riposa®

Руководство пользователя

Массажёр для плеч

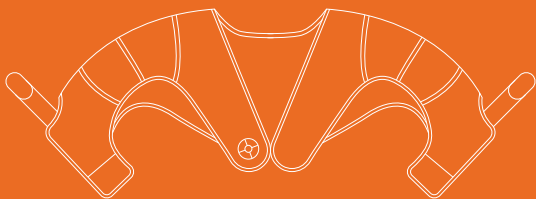

Riposa®

Спасибо за выбор нашего продукта!
Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.

Изображения в данном руководстве являются условными и могут отличаться от реальных.

Применение и назначение

Массажёр RA-SRS01, RA-SRM01, RA-SRL01 с подогревом предназначен для использования в области плеч. Разработан специально для простого и удобного проведения массажа, не прибегая к услугам посторонних людей. Представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет эффективный способ расслабиться, снять напряжение в мышцах и борется с ощущением усталости. Подходит для ежедневного домашнего использования, что позволяет достичь нужного эффекта в привычной обстановке. Массажёр предназначен для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажёра, внимательно изучите настоящее руководство и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажёра.

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Проверьте зону нагрева и кабель питания перед использованием. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство. Не используйте, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения. Не трогайте массажер мокрыми руками. Не погружайте его в воду.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или в местах с легковоспламеняющимися материалами.
- Не используйте устройство дольше чем 20 минут на одном месте, во избежание раздражения или ожогов. Не эксплуатируйте устройство непрерывно более 1 часа.
- Данное устройство запрещено использовать детям, лицам с ограниченными возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Не подвергайте массажер воздействию острых предметов.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не оставляйте работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.

Предупреждение

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны или недавно родили
- имеете нарушения чувствительности кожи (в т. ч. при отсутствии чувствительности к нагреванию)
- недавно перенесли травмы плечевого пояса (суставов), в том числе в результате дорожно-транспортных и других происшествий
- проходите реабилитацию после операции
- имеете повреждения сухожилий, артрит, деформации, варикозное расширение вен и др.
- используете кардиостимулятор или имеете имплантированные медицинские устройства
- страдаете неврологическими нарушениями или расстройствами чувствительности в области плеч
- находитесь в состоянии недомогания или плохого самочувствия, с температурой выше 37°C
- проходите лечение в медицинских учреждениях

Запрещается использовать массажер, если у Вас:

- остеопороз, перелом или растяжение мышц
- онкологические заболевания
- острая сердечная недостаточность
- Не используйте прибор, если на теле в зоне воздействия имеются порезы, открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.

Характеристики

Наименование	Массажёр для плеч с подогревом
Модель	RA-SRS01, RA-SRM01, RA-SRL01
Аккумулятор	8000 мАч
Таймер по умолчанию	20 мин. (по умолчанию)

Номинальное напряжение	3.7 В ---
------------------------	-----------

Потребляемая мощность	27 В
-----------------------	------

Напряжение зарядки	5В, 2А
--------------------	--------

Интенсивность	3 режима
---------------	----------

Уровни нагрева	3 уровня и Выкл.
----------------	------------------

Условия работы	Температура 0°C ~ 40°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 106 кПа
----------------	---


Условия хранения и транспортировки	Температура -10°C ~ 50°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 110 кПа
---------------------------------------	---

Комплект поставки

Массажёр, кабель питания Type-C, чехол для хранения.

Размеры массажёра

Размер	A (ширина плеч)	B (длина руки)
S	35~43 см	18 см
M	50~55 см	20 см
L	58~62 см	20 см

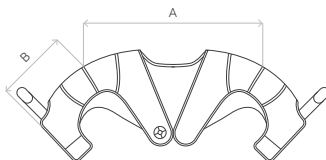



Внимание

- Не накрывайте устройство во время использования (это может вызвать ожоги).
- Если возникнут проблемы во время использования, немедленно отключите устройство и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Выключайте прибор перед установкой на зарядку.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети после полной зарядки. Время зарядки не должно превышать 6 часов. Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки).
- Если во время зарядки устройство сильно нагревается или от него исходит запах, немедленно отключите его от питания и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Не разбирайте устройство, так как это может вызвать удар электрическим током, короткое замыкание или пожар. Ремонт устройства могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Не используйте во время сна.
- Это устройство предназначено для домашнего использования и не заменяет медицинские приборы или лекарства.

Использование



На заметку

- Чрезмерный массаж вреден для здоровья.
- Начинайте с 1-го уровня нагрева и минимального режима вибрации. По умолчанию нагрев выключен.
- Лёгкое покраснение и тепло на коже после использования – это нормально. Однако, если после массажа данным устройством наблюдаются сильное покраснение и опухание кожи, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Устройство может быть горячим при длительном использовании и вызвать ожоги. Не используйте функцию нагрева непрерывно более 20 минут во избежание ожогов.
- Остановите процедуру, если Вы почувствуете дискомфорт, головокружение, головную боль или появится одышка во время массажа. Немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Автоматическое отключение происходит через 20 минут после запуска массажера. Регулируйте частоту использования массажера в зависимости от Ваших предпочтений.

Управление (кнопки и индикаторы)



Зарядка

Перед началом использования зарядите аккумулятор массажера, используя зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки). Для обеспечения Вашей безопасности приобретите и всегда используйте качественный адаптер питания для зарядки устройства.


Подключите кабель питания Type-C к разъему зарядки устройства и к адаптеру питания. Адаптер питания вставьте в розетку электросети. В процессе зарядки индикатор кнопки питания массажера будет равномерно мигать белым. Когда аккумулятор массажера будет заряжен полностью, индикатор загорится белым светом. В процессе работы устройства, если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 20%, то индикатор кнопки питания начинает медленно мигать белым. Если заряд слишком низкий, то устройство отключится.

! Примечание

Это устройство нельзя использовать во время зарядки. Во время зарядки небольшое нагревание устройства и адаптера питания являются нормальными.

Как использовать

① Наденьте массажер, просунув руки в «рукава» и зафиксируйте на груди «липучкой». Закрепите «липучкой» рукава, чтобы было полное прилегание. См. изображение. Рекомендуется надевать массажер поверх только одного слоя тонкой одежды, чтобы она не мешала нагреву и массажу. **Не допускайте прямого контакта с кожей, чтобы избежать ожогов.**

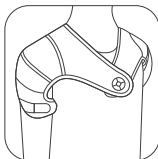


② **Включение.** Нажмите и удерживайте кнопку питания (ⓘ) в течение 2 сек., чтобы включить устройство. Индикатор кнопки питания горит белым. (Если устройство не включается, зарядите его и попробуйте снова).




③ Нажмите на кнопку нагрева ☀, чтобы переключать уровни нагрева или выключить его по Вашему желанию. Индикатор уровня нагрева:

- Зелёный — уровень 1 ≈ 45°C
- Голубой — уровень 2 ≈ 55°C
- Красный — уровень 3 ≈ 65°C
- Без подсветки — нагрев выключен

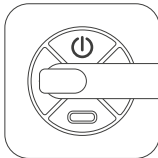

④ Нажмите на кнопку))) , чтобы изменять режим (интенсивность) массажа (Выкл. /Медленно/ Средне/ Интенсивно/ Выкл. (повторно)). Подберите режим на Ваше усмотрение. Индикатор режима (интенсивности):

- Зелёный — медленный
- Голубой — средний
- Красный — интенсивный
- Без подсветки — массаж выключен

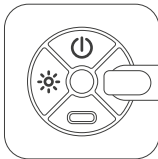

5 Выключение. Устройство автоматически отключается через 20 минут непрерывного использования. Нажмите и удерживайте кнопку питания (⏻) в течение 2 сек., чтобы остановить работу устройства в нужный для Вас момент.

Уход и хранение

Перед чисткой выключите устройство и дайте ему остыть. Пожалуйста, используйте мягкую, сухую ткань для очистки панели управления. Не допускайте попадания жидкости на панель управления!

Внимание! Не погружайте устройство в воду. Используйте салфетку, смоченную в мыльной воде, чтобы удалить грязь с ткани массажера. Перед протиркой салфетку нужно сильно отжать. Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства (спирт, растворители, бензин или моющие средства на основе масла и т. п.). Это может повредить устройство, вызвать растрескивание его частей или обесцвечивание.



Требования к хранению

Храните продукт в недоступном для детей месте, в сухом, прохладном помещении и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Пожалуйста, выключайте устройство, если вы его не используете. Необходимо заряжать массажер каждые 6 месяцев.



Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Литиевая батарея, используемая в этом устройстве, является ценным ресурсом, который подлежит переработке. Специальная батарея, используемая в этом устройстве, не должна использоваться в других продуктах. **Внимание! Не бросайте батарею в огонь, чтобы избежать взрыва. Не разбивайте и не разбирайте её. Не допускайте прямого контакта положительного и отрицательного полюсов батареи с металлическими предметами. Не храните батарею вместе с металлическими предметами.**



Устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, то проверьте следующие пункты. Если наши рекомендации не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Батарея разряжена	Зарядите устройство
	Кнопка питания не сработала	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2-3 секунды
	Устройство уже завершило несколько 20 минутных сеансов массажей подряд	Нужен перерыв
После зарядки работает только несколько минут	Срок службы батареи истек (около 5 лет)	Обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру
Массажер останавливается во время работы	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Остановка через 20 минут – срабатывает встроенный таймер	Если хотите повторить массаж, включите устройство повторно

Гарантия

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное устройство подлежит бесплатному ремонту или обмену торговым предприятием, продавшим его.
2. Гарантийная замена производится при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве.
3. Гарантия на устройство не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя устройства из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т. п.;
 - использования устройства в условиях и режимах, отличающихся от бытовых;
 - в случае повреждения устройства в результате пожаров, землетрясений, наводнений и иных стихийных бедствий;
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного устройства производился самостоятельно или неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Товар сертифицирован.



Riposa в переводе с итальянского означает «отдыхай». Для нас это не просто слово, а состояние, к которому мы стремимся в каждом продукте. Мы верим, что забота о себе — это не задача, а удовольствие.