


Riposa®

Руководство пользователя

Массажёр для поясницы

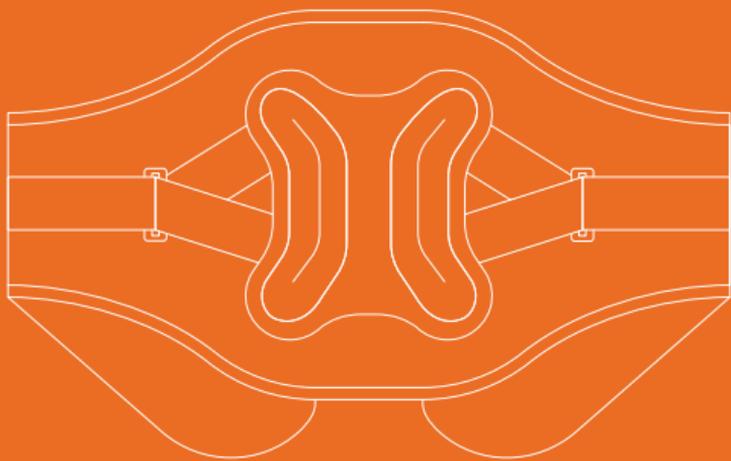

Riposa®

**Спасибо за выбор нашего продукта!
Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство перед использованием.**

Изображения в данном руководстве являются условными и могут отличаться от реальных.

Применение и назначение

Массажёр RA-WT01 с подогревом предназначен для использования в области поясницы. Разработан специально для простого и удобного проведения массажа, не прибегая к услугам посторонних людей. Представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет эффективный способ расслабиться, снять напряжение в мышцах и борется с ощущением усталости. Оснащенный уникальной системой, этот прибор имитирует движения пальцев массажиста, обеспечивая глубокий и качественный массаж. Этот массажёр помогает не только снять напряжение и усталость в мышцах поясницы, но также способствует улучшению кровообращения, уменьшению боли и ускорению процесса восстановления после физических нагрузок. Подходит для ежедневного домашнего использования, что позволяет достичь нужного эффекта в привычной обстановке. Массажёр предназначен для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажёра, внимательно изучите настоящее руководство и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажёра.

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Проверьте зону нагрева и кабель питания перед использованием. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство. Не используйте, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения. Не трогайте массажер мокрыми руками. Не погружайте его в воду.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или в местах с легковоспламеняющимися материалами.
- Не используйте устройство дольше чем 20 минут на одном месте, во избежание раздражения или ожогов. Не эксплуатируйте устройство непрерывно более 1 часа.
- Данное устройство запрещено использовать детям, лицам с ограниченными возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Не подвергайте массажёр воздействию острых предметов.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не оставляйте работающее устройство под подушками, одеялами и т. п.



Предупреждение

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны или недавно родили
 - имеете нарушения чувствительности кожи (в т. ч. при отсутствии чувствительности к нагреванию)
 - недавно перенесли травмы в поясничной зоне, в том числе в результате дорожно-транспортных и других происшествий
 - проходите реабилитацию после операции
 - имеете онкологические заболевания
 - используете кардиостимулятор или имеете имплантированные медицинские устройства
 - страдаете неврологическими нарушениями или расстройствами чувствительности в области поясницы
 - находитесь в состоянии недомогания или плохого самочувствия, с температурой выше 37°C
 - проходите лечение в медицинских учреждениях.
- Не используйте прибор, если на теле имеются порезы, открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т. п.
 - Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.

Характеристики


Наименование	Массажёр с подогревом для поясницы
Модель	RA-WT01
Аккумулятор	8000 мАч
Таймер по умолчанию	20 мин. (по умолчанию)
Номинальное напряжение	3.7 В ==
Потребляемая мощность	23 В

Напряжение зарядки	5В, 2А
Вибрация	3 режима
Нагрев	3 уровня и Выкл.
Условия работы	Температура 0°C ~ 40°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 106 кПа
Условия хранения и транспортировки	Температура -10°C ~ 50°C Влажность < 80% рт.ст. Давление 70 кПа - 110 кПа

Комплект поставки

Массажёр, кабель питания Туре-С, доп. удлинитель 30 см, доп. удлинитель 70 см, чехол для хранения.

Размеры массажёра

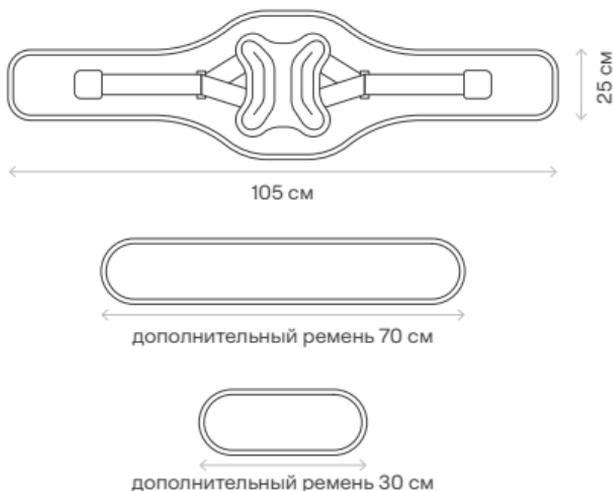

Внимание


- Не накрывайте устройство во время использования (это может вызвать ожоги).
- Если возникнут проблемы во время использования, немедленно отключите устройство и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Выключайте прибор перед установкой на зарядку.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети после полной зарядки. Время зарядки не должно превышать 4.5 часа. Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки).
- Если во время зарядки устройство сильно нагревается или от него исходит запах, немедленно отключите его от питания и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Не разбирайте устройство, так как это может вызвать удар электрическим током, короткое замыкание или пожар. Ремонт устройства могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Не используйте во время сна.
- Это устройство предназначено для домашнего использования и не заменяет медицинские приборы или лекарства.

Использование

На заметку

- Чрезмерный массаж вреден для здоровья.
- Начинайте с 1-го уровня нагрева и минимального режима вибрации. По умолчанию нагрев выключен.
- Лёгкое покраснение и тепло на коже после использования – это нормально. Однако, если после массажа данным устройством наблюдаются сильное покраснение и опухание кожи, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Устройство может быть горячим при длительном использовании и вызвать ожоги. Не используйте функцию нагрева непрерывно более 20 минут во избежание ожогов.
- Остановите процедуру, если Вы почувствуете дискомфорт, головокружение, головную боль или появится одышка во время массажа. Немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Автоматическое отключение происходит через 20 минут после запуска массажера. Регулируйте частоту использования массажера в зависимости от Ваших предпочтений, с учетом индивидуальных особенностей.

Управление (кнопки и индикаторы)

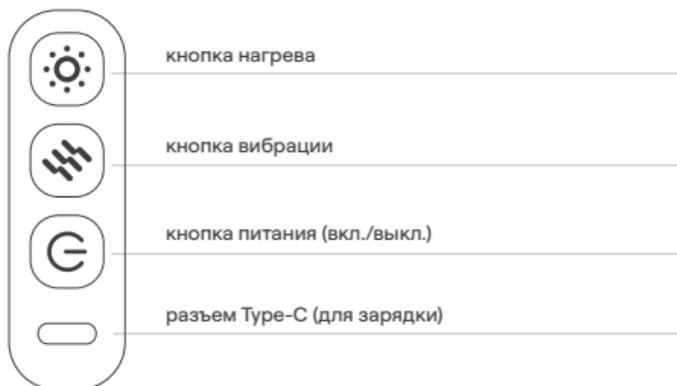

Зарядка

Перед началом использования зарядите аккумулятор массажера, используя зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки). Для обеспечения Вашей безопасности приобретите и всегда используйте качественный адаптер питания для зарядки устройства.


Подключите кабель питания Type-C к разъему зарядки устройства и к адаптеру питания. Адаптер питания вставьте в розетку электросети. В процессе зарядки индикатор кнопки питания массажера будет равномерно мигать белым. Когда аккумулятор массажера будет заряжен полностью, индикатор загорится белым светом. В процессе работы устройства, если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 15%, то индикатор кнопки питания начинает медленно мигать белым. Если заряд слишком низкий, то устройство отключится.

Примечание

Это устройство нельзя использовать во время зарядки. Во время зарядки небольшое нагревание устройства и адаптера питания являются нормальными.

Фиксация массажёра


1 Отклейте липучку и оберните пояс вокруг талии, как показано на изображении. Рекомендуется надевать пояс поверх только одного слоя тонкой одежды, чтобы она не мешала нагреву и массажу. (В комплект входят 2 дополнительных ремешка — при необходимости можно увеличить общую длину пояса). **Не допускайте прямого контакта с кожей, чтобы избежать ожогов.**

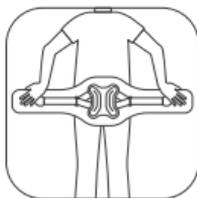

2 левой рукой запахните пояс, правой рукой — затяните и плотно зафиксируйте его («липучка»).



3 Затяните эластичные ремни с обеих сторон и зафиксируйте спереди (так же на «липучку») (см. рис.). Убедитесь, что пояс плотно прилегает к талии.

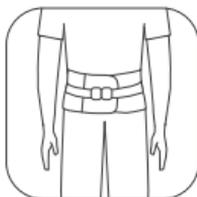

Работа массажёра

1 **Включение.** Нажмите и удерживайте кнопку питания (ⓘ) в течение 2 сек., чтобы включить устройство. Индикатор кнопки питания горит красным. Короткое нажатие на кнопку питания выключает функцию нагрева живота (индикатор станет белым и будет гореть постоянно). Повторное нажатие — снова включает нагрев. (Если устройство не включается, зарядите его и попробуйте снова).



2 Нажмите на кнопку нагрева , чтобы переключать уровни нагрева или выключить его по Вашему желанию. Индикаторы в зависимости от уровня:

- Зелёный — уровень 1 = 45 °C
- Голубой — уровень 2 = 55 °C
- Красный — уровень 3 = 65 °C
- Без света — нагрев выключен



3 Нажмите на кнопку , чтобы изменять режимы вибрации массажа (Низкий/Средний/ Интенсивный). Подберите режим вибрации на Ваше усмотрение из 3-х возможных вариантов.

Индикаторы режимов вибрации:

- Зелёный — медленный
- Голубой — средний
- Красный — интенсивный
- Без света — вибрация отключена



4 **Выключение.** Устройство автоматически отключается через 20 минут непрерывного использования. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 сек., чтобы остановить работу устройства в нужный для Вас момент.

Уход и хранение

Перед чисткой выключите устройство и дайте ему остыть. Пожалуйста, используйте мягкую, сухую ткань для очистки панели управления. Не допускайте попадания жидкости на панель управления!

Внимание! Не погружайте устройство в воду. Используйте салфетку, смоченную в мыльной воде, чтобы удалить грязь с ткани массажера. Перед протиркой салфетку нужно сильно отжать. Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства (спирт, растворители, бензин или моющие средства на основе масла и т.п.). Это может повредить устройство, вызвать растрескивание его частей или обесцвечивание.



Требования к хранению

Храните продукт в недоступном для детей месте, в сухом, прохладном помещении и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Пожалуйста, выключайте устройство, если вы его не используете. Необходимо заряжать массажер каждые 6 месяцев.



Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов. Литиевая батарея, используемая в этом устройстве, является ценным ресурсом, который подлежит переработке. Специальная батарея, используемая в этом устройстве, не должна использоваться в других продуктах. **Внимание! Не бросайте батарею в огонь, чтобы избежать взрыва. Не разбивайте и не разбирайте ее. Не допускайте прямого контакта положительного и отрицательного полюсов батареи с металлическими предметами. Не храните батарею вместе с металлическими предметами.**



Устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, то проверьте следующие пункты. Если наши рекомендации не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу, изготовителю или импортёру.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Массажёр подключен к эл. розетке	Отключите кабель питания
	Батарея разряжена	Зарядите устройство
	Кнопка питания не работала	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2-3 секунды

	Устройство уже завершило несколько 20 минутных сеансов массажей подряд	Нужен перерыв
После зарядки работает только несколько минут	Срок службы батареи истек (около 5 лет)	Обратитесь к продавцу, изготовителю или импортёру
Массажёр останавливается во время работы	Низкий заряд батареи Остановка через 20 минут – срабатывает встроенный таймер	Зарядите устройство Если хотите повторить массаж, включите устройство повторно

Гарантия

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное устройство подлежит бесплатному ремонту или обмену торговым предприятием, продавшим его.
2. Гарантийная замена производится при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве.
3. Гарантия на устройство не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя устройства из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т. п.;
 - использования устройства в условиях и режимах, отличающихся от бытовых;
 - в случае повреждения устройства в результате пожаров, землетрясений, наводнений и иных стихийных бедствий;
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного устройства производился самостоятельно или неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Товар сертифицирован.



Riposa в переводе с итальянского означает «отдыхай». Для нас это не просто слово, а состояние, к которому мы стремимся в каждом продукте. Мы верим, что забота о себе — это не задача, а удовольствие.