

Riposa®

Руководство пользователя

Массажёр для шеи, плеч, поясницы, ног



Riposa®

**Спасибо за выбор нашего продукта!
Для вашего удобства, пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство перед использованием.**

Изображения в данном руководстве являются условными и могут отличаться от реальных.

Применение и назначение

Массажёр RA-NK01 предназначен для использования в области шеи, плеч, поясницы, ног. Разработан специально для простого и удобного проведения массажа, не прибегая к услугам посторонних людей. Представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет эффективный способ расслабиться, снять напряжение в мышцах и борется с ощущением усталости. Оснащенный уникальной системой, этот прибор имитирует движения пальцев массажиста, обеспечивая глубокий и качественный массаж. Этот массажёр помогает не только снять напряжение и усталость в мышцах шейно-воротниковой зоны, поясницы и ног, но также способствует улучшению кровообращения, уменьшению боли и ускорению процесса восстановления после физических нагрузок. Подходит для ежедневного домашнего использования, что позволяет достичь нужного эффекта в привычной обстановке. Массажёр предназначен для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера, внимательно изучите настоящее руководство и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажёра.

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Проверьте зону нагрева и кабель питания перед использованием. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство. Не используйте, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения. Не трогайте массажёр мокрыми руками. Не погружайте его в воду.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или в местах с легковоспламеняющимися материалами.
- Не используйте устройство дольше чем 15 минут на одном месте, во избежание раздражения или ожогов. Не эксплуатируйте устройство непрерывно более 1 часа.
- Данное устройство запрещено использовать детям, лицам с ограниченными возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Не подвергайте массажёр воздействию острых предметов.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не оставляйте работающее устройство под подушками, одеялами и т. п.

Предупреждение

Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны или недавно родили
 - имеете нарушения чувствительности кожи (в т. ч. при отсутствии чувствительности к нагреванию)
 - недавно перенесли травмы (переломы, растяжения), в том числе в результате дорожно-транспортных и других происшествий
 - проходите реабилитацию после операции
 - имеете злокачественные опухоли, заболевания сердца, остеопороз или миозит (воспаление мышц)
 - используете кардиостимулятор или имеете имплантированные медицинские устройства
 - страдаете заболеваниями позвоночника (аномальные изгибы), нарушением кровообращения или нарушением чувствительности из-за диабета
 - подвержены кожным заболеваниям или имеете рубцы
 - находитесь в состоянии недомогания или плохого самочувствия, с температурой выше 37°C
 - ощущаете острый воспалительный процесс, слабость, озноб, тошноту, сильные перепады давления и другие тяжелые симптомы
 - проходите лечение в медицинских учреждениях
-
- **Не используйте прибор, если на теле имеются порезы, открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т. п.**
 - **Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.**

Характеристики

Наименование Массажёр для шеи, плеч, поясницы, ног

Модель RA-NK01

Аккумулятор 4000 мАч

Таймер по умолчанию 15 мин. (автоматически)

Номинальное напряжение 5 В ---

Потребляемая мощность 10 В

Напряжение зарядки 5В, 2А

Работа массажера 2 режима (классический/пульсирующий)

Интенсивность 2 уровня (средний/высокий)

Нагрев 45 °С/40 °С/Выкл.

Вес 1.1 кг

Условия хранения и транспортировки
Температура 0°С ~ 40°С
Влажность < 80% рт.ст.
Давление 70 кПа - 106 кПа

Условия хранения и транспортировки
Температура -10°С ~ 50°С
Влажность < 80% рт.ст.
Давление 70 кПа - 110 кПа

Комплект поставки

Массажёр, кабель питания Туре-С, дополнительный съемный чехол.

Внимание


- Не накрывайте устройство во время использования (это может вызвать ожоги).
- Если возникнут проблемы во время использования, немедленно отключите устройство и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Выключайте прибор перед установкой на зарядку.
- Пожалуйста, отключите устройство от сети после полной зарядки. Время зарядки не должно превышать 6 часов. Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки).
- Если во время зарядки устройство сильно нагревается или от него исходит запах, немедленно отключите его от питания и обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.
- Не разбирайте устройство, так как это может вызвать удар электрическим током, короткое замыкание или пожар. Ремонт устройства могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Не используйте во время сна.
- Это устройство предназначено для домашнего использования и не заменяет медицинские приборы или лекарства.

Использование

На заметку

- Чрезмерный массаж вреден для здоровья.
- Начинать с режима работы 1 (классический) и с 1 уровня интенсивности (средний) при использовании. По умолчанию нагрев выключен.
- Лёгкое покраснение и тепло на коже после использования – это нормально. Однако, если после массажа данным устройством наблюдаются сильное покраснение и опухание кожи, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Устройство может быть горячим при длительном использовании и вызвать ожоги. Функцию нагрева не следует использовать непрерывно более 15 минут, чтобы избежать ожогов.
- Остановите процедуру, если Вы почувствуете дискомфорт, головокружение, головную боль или появится одышка во время массажа. Немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Автоматическое отключение происходит через 15 минут после запуска массажера.


Управление (кнопки и индикаторы)

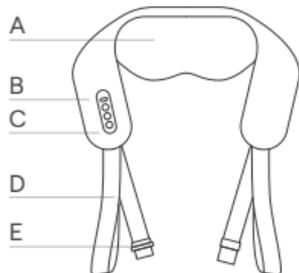

- A. Массажные головы
- B. Разъем Type-C (для зарядки)
- C. Панель управления
- D. Боковые ремни
- E. Ремень фиксации сзади



Массажная голова съёмная (потяните вверх) и имеет 2 стороны: с мягкой и жесткой поверхностью. Выберите сторону в зависимости от ваших предпочтений массажа и уровня комфорта.

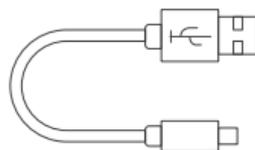


кабель USB- Type-C



Примечание

Индикатор состояния мигает красным, если батарея разряжена, горит красным при включенном нагреве, горит белым при включении питания и выключенном нагреве.

Зарядка

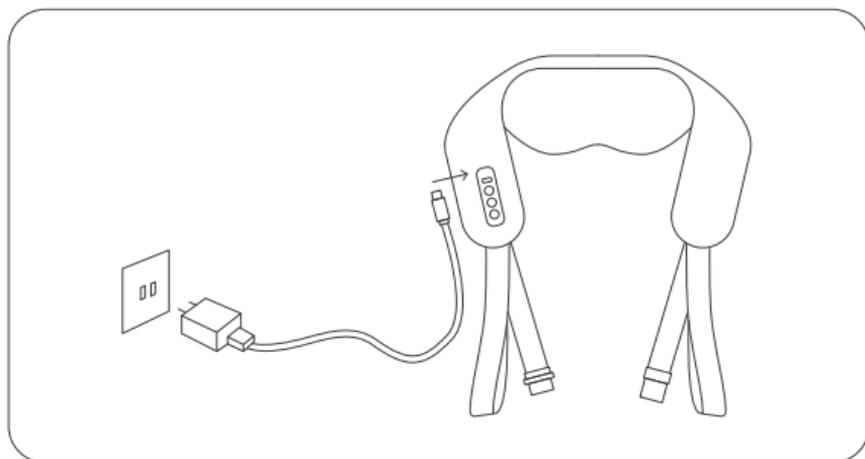

Перед началом использования зарядите аккумулятор массажера, используя зарядное устройство 5В, 2А (не входит в комплект поставки). Для обеспечения Вашей безопасности приобретите и всегда используйте качественный адаптер питания для зарядки устройства.

Подключите кабель питания Type-C к разъему зарядки устройства (B) и к адаптеру питания. Адаптер питания вставьте в розетку электросети. В процессе зарядки индикатор состояния массажера будет медленно мигать красным. Когда аккумулятор массажера будет заряжен полностью, индикатор загорится белым светом. В процессе работы устройства, если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 20%, индикатор начинает мигать красным. Если заряд слишком низкий, индикатор мигнет красным 2 сек. и устройство отключится.

! Примечание

Это устройство нельзя использовать во время зарядки. Если устройство работает и подключено к зарядке, оно автоматически войдет в режим защиты и прекратит работу. Во время зарядки небольшое нагревание устройства и адаптера питания являются нормальными.

Работа массажёра

1 Включение. Нажмите и удерживайте кнопку питания (⏻) в течение 2 сек., чтобы включить устройство. По умолчанию включаются 1 массажный режим (классический), 1 степень интенсивности, без подогрева. Индикатор состояния устройства горит белым. (Если устройство не включается, зарядите его и попробуйте снова).



2 Короткое нажатие на кнопку режима массажа (M) позволяет переключаться между 2 предусмотренными вариантами (Классический/Пульсирующий).



3 Нажмите на кнопку нагрева (☀️), по умолчанию включается режим сильного нагрева. Короткое нажатие переключает режимы: Сильный (45°C)/Слабый (40°C) / Выключен. Индикатор состояния устройства горит: красным – нагрев включен, белым - нагрев выключен.




4 Интенсивность по умолчанию – средняя. Короткое нажатие на кнопку (⊕) переключает уровень интенсивности массажа: Средний/Высокий.




5 **Выключение.** Устройство автоматически отключается через 15 минут непрерывного использования. Нажмите и удерживайте кнопку питания (⏻) в течение 2 сек., чтобы остановить работу устройства в нужный для Вас момент.




Варианты использования

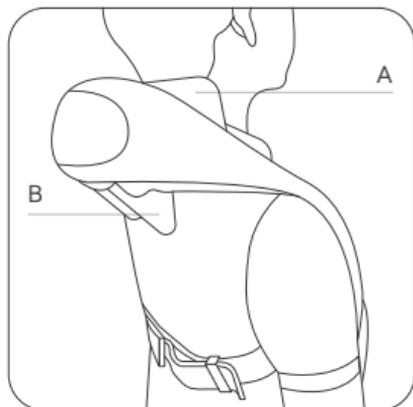

A. Верхний массажный элемент
B. Нижний массажный элемент

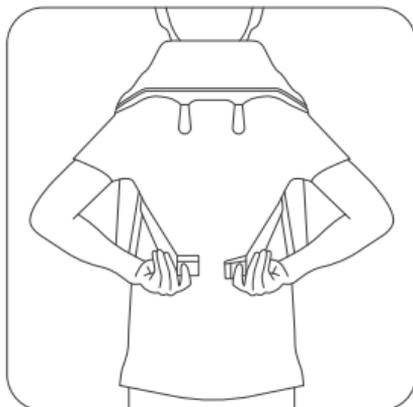

Положите массажер на плечи (панель управления должна быть справа). Подтяните по своей фигуре и застегните на спине ремень для фиксации массажера.

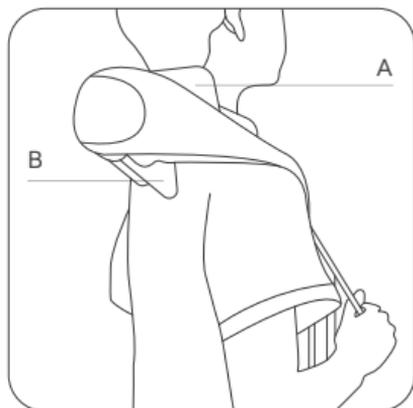


A. Верхний массажный элемент
B. Нижний массажный элемент





Измените длину ремней по своему удобству. Положите массажер на плечи (панель управления должна быть справа) и обеими руками крепко держите боковые ремни. За счет натяжения ремней Вы можете регулировать положение устройства и силу массажа.

Массажные зоны

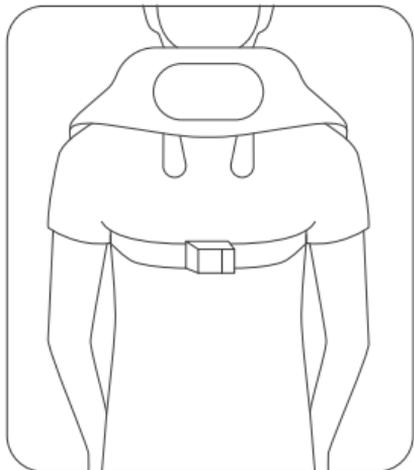

Массаж шейно-воротниковой зоны и плеч

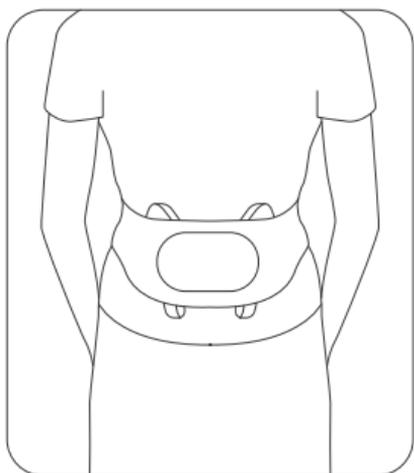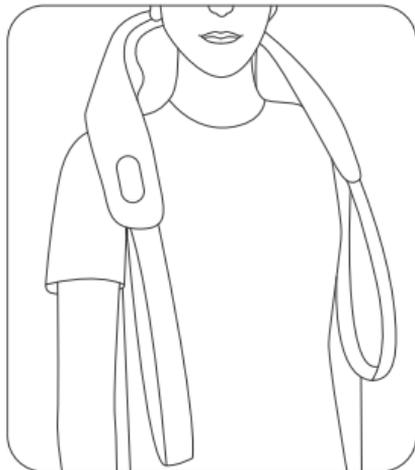

Массаж поясницы



Массаж ног

Уход и хранение


Перед чисткой выключите устройство и дайте ему остыть. Пожалуйста, используйте мягкую, сухую ткань для очистки панели управления. Не допускайте попадания жидкости на панель управления!

Внимание! Не погружайте устройство в воду.



Используйте салфетку, смоченную в мыльной воде, чтобы удалить грязь с ткани массажёра. Перед протиркой салфетку нужно сильно отжать. Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства (спирт, растворители, бензин или моющие средства на основе масла и т. п.). Это может повредить устройство, вызвать растрескивание его частей или обесцвечивание.

Исключение: в комплект поставки входят 2 съёмных чехла (один сразу надет на массажёр, второй дополнительный). Для ухода за чехлом необходимо снять его с массажёра. Вы можете использовать для очистки чехла стиральную машину в режиме деликатной стирки при $T=30^{\circ}\text{C}$. Сушить чехол только естественным образом (нельзя класть на батарею, нельзя гладить и т. д.)

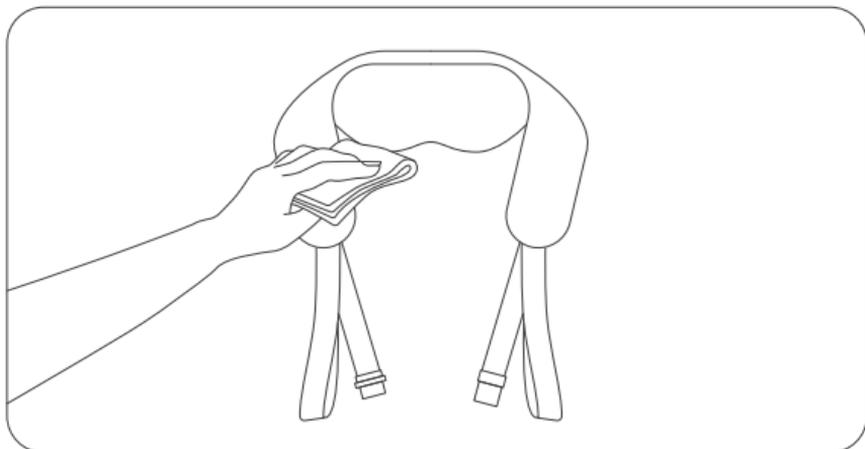

Требования к хранению

Храните продукт в недоступном для детей месте, в сухом, прохладном помещении и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Пожалуйста, выключайте устройство, если вы его не используете. Необходимо заряжать массажёр каждые 6 месяцев.



Утилизация

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов. Литиевая батарея, используемая в этом устройстве, является ценным ресурсом, который подлежит переработке. Специальная батарея, используемая в этом устройстве, не должна использоваться в других продуктах. **Внимание! Не бросайте батарею в огонь, чтобы избежать взрыва. Не разбивайте и не разбирайте ее. Не допускайте прямого контакта положительного и отрицательного полюсов батареи с металлическими предметами. Не храните батарею вместе с металлическими предметами.**



Устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, то проверьте следующие пункты. Если наши рекомендации не помогли решить проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Массажёр подключен к эл. розетке	Отключите кабель питания
	Батарея разряжена	Зарядите устройство
	Кнопка питания не сработала	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2-3 секунды
	Устройство уже завершило несколько 15 минутных сеансов массажей подряд	Нужен перерыв
После зарядки работает только несколько минут	Срок службы батареи истек (около 5 лет)	Обратитесь к продавцу, изготовителю или импортеру
Массажёр останавливается во время работы	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Остановка через 15 минут – срабатывает встроенный таймер	Если хотите повторить массаж, включите устройство повторно

Гарантия

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное устройство подлежит бесплатному ремонту или обмену торговым предприятием, продавшим его.
2. Гарантийная замена производится при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве.
3. Гарантия на устройство не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя устройства из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т. п.;
 - использования устройства в условиях и режимах, отличающихся от бытовых;
 - в случае повреждения устройства в результате пожаров, землетрясений, наводнений и иных стихийных бедствий;
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного устройства производился самостоятельно или неуполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Товар сертифицирован.



Riposa в переводе с итальянского означает «отдыхай». Для нас это не просто слово, а состояние, к которому мы стремимся в каждом продукте. Мы верим, что забота о себе — это не задача, а удовольствие.